




DID SABZ

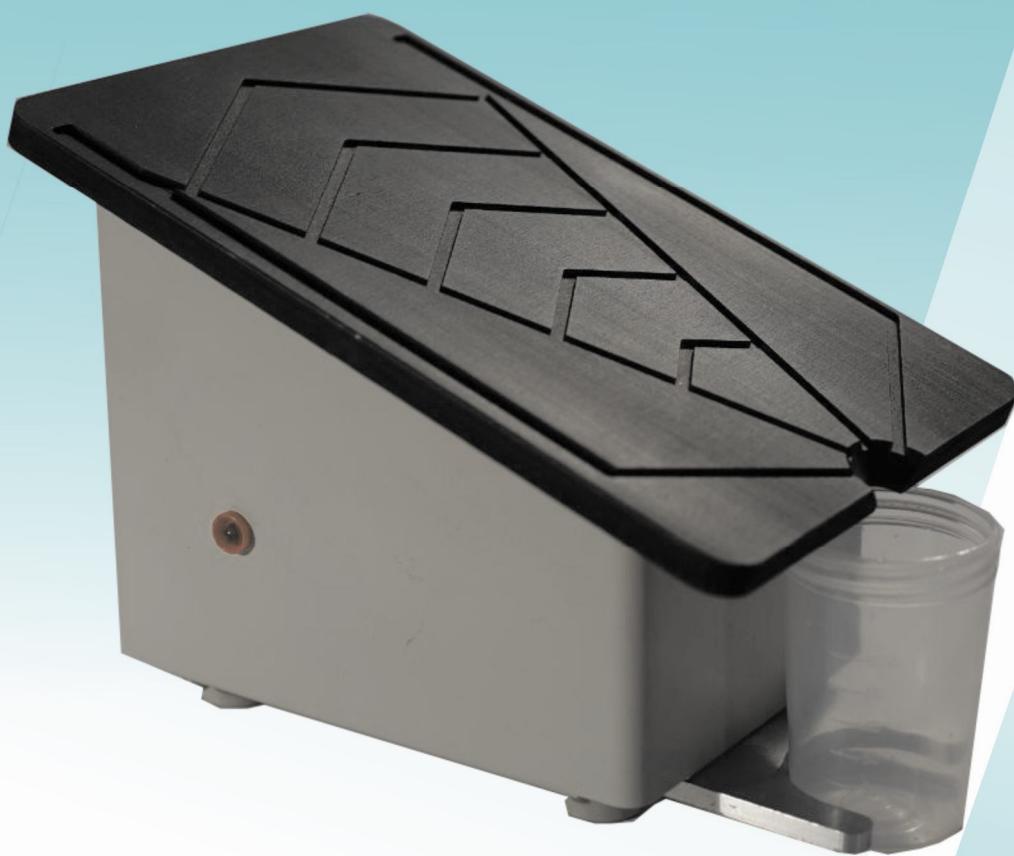

Paraffin Remover

DS 9802



شرکت دید سبز

Paraffin Remover

DS 9802



یک سال گارانتی / ده سال پشتیبانی فنی

Technical Data:

Operating Temperature : 80° ± 3°

Dimensions (W x D x H): 135x 190x 145 mm

Weight: approx. 1.5 kg

Voltage: 220 V

Hot Plate Area: 200x 135 mm

مشخصات و ویژگی ها:

- گرمای صفحه: ۸۰ درجه سانتیگراد
- وزن دستگاه حدوداً ۱/۵ کیلوگرم
- ولتاژ کار ۲۲۰ ولت
- ابعاد صفحه گرم: ۲۰۰X ۱۳۵ میلیمتر
- ابعاد دستگاه: ۱۳۵X ۱۹۰X ۱۴۵ میلیمتر

The Paraffin Remover Model DS 9802 is used to remove excess paraffin from the outside edges of the plastic molds after processing and embedding.

The plastic molds are placed on the hot surface and the excess paraffin is melted and filled in the drain channels and then in the waste container.

The device is equipped with a high protection system against damages from overheating.

دستگاه تمیز کننده پارافین برای تمیز کردن پارافین اضافی از لبه های بیرونی قالب های پلاستیکی تیشو توک بعد از پردازش و قالب گیری استفاده می شود.

قالب های پلاستیکی تیشو توک روی سطح قرار گرفته پارافین زاید اطراف آنها وارد شیارهای سطح گرم شده و سپس در ظرف مخصوص جمع آوری پارافین وارد می شود. این دستگاه مجهز به سیستم محافظتی دقیق برای جلوگیری از افزایش دما میباشد.

DID SABZ Co.

ADD.:Azadi Blvd., Opposite To Customs House
Ostad Tanha Ave., Unit 6, Urmia-Iran
Postal Code: 57176-66593
Tel-Fax: (+98) 44 32771214-32781173



www.didsabz-co.com

E-mail: info@didsabz-co.com

شرکت دید سبز (سهامی خاص)

آدرس: ارمنی، بلوار آزادی، روزروی گمرک
خیابان استاد تنها، واحد ششم، دست راست
شرکت دید سبز کد پستی: ۵۷۱۷۶-۶۶۵۹۳
تلفن و دورنوبی: (۰۴۴) ۳۲۷۷۱۲۱۴-۲۲۷۸۱۱۷۳